

Performance et simplicité dans l'analyse de la composition corporelle

InBody170



Performance et simplicité dans l'analyse de la composition corporelle

-  Equipé d'une imprimante thermique
-  Léger, facile à déplacer
-  Taille réduite
-  Interface conviviale
-  Mesure rapide en 30 secondes
-  Guidage vocal
-  Design élégant



Les spécificités d'InBody


Mesures directes segmentaires (DSM-BIA)




Mesure précise du tronc



Electrodes tetrapolaires à 8 points de contact, garantissant une haute reproductibilité

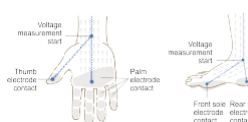

Des mesures précises, quelque soit la morphologie du sujet

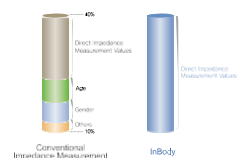



Il est essentiel de connaître sa composition corporelle afin de perdre du poids de façon saine

Un régime sans suivi peut mener à une perte d'eau et de masse maigre (qui sont vitales pour maintenir les fonctions du corps en bonne santé). InBody permet de s'assurer que la perte de poids est liée à une perte de masse grasse. En surveillant non seulement le poids, mais également la composition corporelle, la forme idéale (masse maigre élevée et masse grasse faible) peut être atteinte.

InBody 170 fournit des résultats des résultats complets

Informations personnelles

Le nom du sujet, son genre, son âge, sa taille, son poids, l'heure et la date de l'analyse sont indiqués ici.

Composition corporelle

Les barres graphiques et les valeurs de poids, de masse musculaire (Muscle squelettique) et la masse grasse sont présentés ici. Vous pouvez également surveiller TBW (Eau corporelle totale) et FFM (Masse non grasse, qui correspond à l'ensemble des éléments du corps à l'exception de la masse grasse).

Diagnostic d'obésité

Ceci permet au sujet de vérifier son BMI (IMC), classiquement utilisé pour le diagnostic d'obésité, le pourcentage de masse grasse, le rapport taille-hanche et le niveau de graisse viscérale.

Masse maigre segmentaire

Indique la masse maigre pour chaque segment ainsi que son évaluation.

Masse grasse segmentaire

Indique la masse grasse pour chaque segment, le pourcentage de masse grasse ainsi que son évaluation.

Contrôle muscle-graisse

Les signes (+) et (-) indiquent respectivement une masse à gagner ou à perdre.

Score Fitness

Le score fitness est une valeur numérique facile à retenir pour le sujet, indicateur de son état de santé global.

Historique de la composition corporelle

L'historique comprend les 10 dernières mesures.

Impédance

InBody170 fournit les mesures d'impédance pour chaque segment à chaque fréquence.

Informations sur la société

InBody170 03/03/11 11:04

ID : 654

Gender: Male Age : 31

Height : 175.0cm Weight : 100.2kg

Body Composition

Weight 100.2 kg (57.3~77.5)

Muscle 38.2 kg (28.8~35.2)

Fat 33.6 kg (8.1~16.2)

TBW 48.8 L (37.9~46.3)

FFM 66.6 kg (51.6~63.0)

Obesity Diagnosis

BMI 32.7 kg/m² (18.5~25.0)

PBF 33.5 % (10.0~20.0)

WHR 0.95 (0.80~0.90)

Visceral Fat 14 level (Under 10)

BMR 1809 Kcal (2026~2394)

Segmental Lean

	Lean Mass(kg)	Evaluation
Right Arm	3.99	Over
Left Arm	4.04	Over
Trunk	30.7	Normal
Right Leg	10.60	Normal
Left Leg	10.51	Normal

Segmental Fat

	PBF(%)	Fat Mass(kg)	Evaluation
Right Arm	37.1	2.5	Over
Left Arm	36.5	2.5	Over
Trunk	35.6	18.0	Over
Right Leg	29.1	4.6	Over
Left Leg	29.0	4.5	Over

* Segmental Fat is estimated.

Muscle-Fat Control

Muscle 0.0 kg Fat -21.8 kg

Fitness Score 68 points

Body Composition History

Date	Weight	Muscle	Fat
03/03/11	100.2	38.2	33.6

Impedance

	RA	LA	TR	RL	LL
20	273.8	272.1	25.9	220.2	222.1
100	237.8	236.0	21.8	191.3	194.0

Biospace Co. Ltd.
www.e-inbody.com
info@biospace.co.kr

InBody170 Specifications

Caractéristiques

Fréquences	20kHz, 100kHz
Types d'électrodes	Electrodes tétrapolaires tactiles à 8 points de contact Tactile Electrode
Méthode de mesure	Impédance bioélectrique directe segmentaire multi-frequence (DSM-BIA)
Parametres(LCD)	Poids Masse musculaire (Masse musculaire squelettique) Masse grasse Masse grasse viscérale (Niveau)
Paramètres(Impression thermique)	Poids, Masse musculaire (Masse musculaire squelettique), Masse grasse TBW (eau corporelle totale), FFM (Masse non grasse) BMI (IMC), PBF (pourcentage de masse grasse), WHR (rapport taille-hanche), Visceral Fat Level (niveau de graisse viscérale), BMR Masse maigre segmentaire (Masse, Evaluation) Masse grasse segmentaire (Masse, %, Evaluation) Contrôle muscle-graisse Historique de la composition corporelle Impédance Informations sur la société


Specifications

Obtention des résultats	Imprimante thermique (par défaut)
Tonalité	Beep
Son	Guidage vocal
Type d'affichage(LCD)	EBTN LCD
Interface utilisateur	Facile à contrôler grâce au clavier
Mobilité	Colonne pliable facile à transporter et à stocker

AutresSpécifications

Courant appliqué	250
Consommation	50VA
Adaptateur	Power Input AC100~240V, 50/60Hz, 1.2A Power Output DC 12V, 3.4A
Interface de sortie	RS-232C 1EA, USB Slave 1EA
Compatible Printer	Imprimante thermique (par défaut)
Dimensions	397(l)×608(L)×955(H): mm 15.6(l)×24(L)×37.6(H): inch
Poids de l'appareil	14.3kg(31.5lb.)
Durée de la mesure	Environ 30sec.
Conditions d'utilisation	10 ~ 40°C(50 ~ 104°F), 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106kPa
Conditions de stockage	-20 ~ 70°C(-4 ~ 158°F), 10 ~ 95%RH, 50 ~ 106kPa(No condensation)
Portée maximale	10 ~ 250kg(22 ~ 551lb.)
Normes de taille	95 ~ 220cm(3ft. 1.4in. ~ 7ft. 2.6in.)
Tranche d'âge	3 ~ 99 ans

* Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable

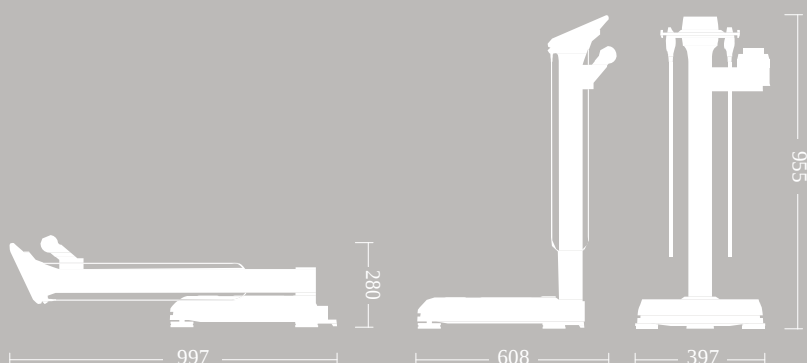

Certificats et brevets obtenus par Biospace



0120

CE 0120



U.S. patent U.S. 5720296



Canada patent C.N. 2225184



Japan patent



ISO13485



ISO9001



Korea Food & Drug Administration

BIOSPACE

InBody Tec4H,
TEL : 04 67 200 203
FAX : 04 67 209 970
Site: <http://www.e-inbody.fr>